

# APARAT SŁUCHOWY

ClearTone 16™

HZNA01970



Przed użyciem nowego aparatu słuchowego prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.

## Przed założeniem



Ważne jest, aby przed założeniem aparatu słuchowego upewnić się, że uszy są czyste. Weź patyczek higieniczny i usuń wosk wokół zewnętrznej części ucha.

**Uwaga:** nie wsuwaj patyczka higienicznego do wnętrza ucha! czyść wyłącznie zewnętrzną część uszu!

Jeśli w uchu nagromadzi się zbyt dużo woskowiny, zablokuje ona dźwięk płynący z aparatu słuchowych.

1

## Rozwiązywanie problemów

### Brak dźwięku podczas noszenia?

Jeśli nie ma dźwięku:

- Sprawdź, czy aparat słuchowy jest włączony.
- Upewnij się, że aparat słuchowy jest w pełni naładowany.
- Sprawdź poziom głośności, aby upewnić się, że jest dostosowany do Twojego słuchu.
- Upewnij się, że Twoje uszy są czyste i nic nie blokuje kanału słuchowego.

**Uwaga:** jeśli aparat słuchowy milczy lub dźwięk staje się słaby z powodu zablokowania wylotu dźwięku, należy wyczyścić wylot dźwięku.

4

### Jeśli słyszysz ciągłe sprzężenie zwrotne lub wysoki, piskliwy dźwięk:

Może być konieczne wypróbowanie innego rozmiaru gumki. Sprzężenie zwrotne zazwyczaj oznacza, że gumka jest za mała i dźwięk ucieka z kanału słuchowego. Gumka powinna być wystarczająco duża, aby zapobiec sprzężeniu, ale jednocześnie zapewniać komfort i stabilnie leżeć w uchu.



5

## Jak zakładać

Wybierz rozmiar gumki (kopułki), który Twoim zdaniem będzie pasował do Twojego ucha. Może zajść potrzeba wypróbowania kilku różnych rozmiarów, zanim znajdziesz idealne dopasowanie.




Ostrożnie zdejmij gumkę z aparatu słuchowego, a następnie wsuń nową gumkę na jej miejsce. Włóż aparat słuchowy do kanału słuchowego. Powinieneś czuć, że leży ściśle, bezpiecznie i wygodnie. Jeśli tak nie jest, wypróbuj inny rozmiar gumki.

2

## Włączanie / Wyłączanie

**Opcja 1:** Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „N” i odczekaj 10 sekund, aż zacznie działać.

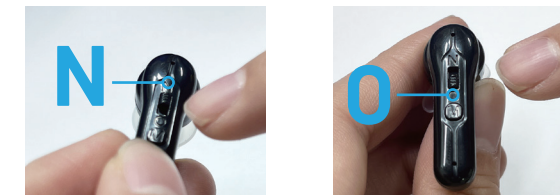

**Opcja 2:** Aparat słuchowy włączy się automatycznie po wyjęciu z etui ładującego po upływie 10 sekund, jeśli przycisk jest ustawiony w pozycji „N”.

**Uwaga:** podczas noszenia aparatu słuchowego prosimy nie zakrywać mikrofonu znajdującego się u góry. przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 10-12 godzin.

6

**Uwaga:** Pamiętaj, aby wybrać najlepiej dopasowaną gumkę do swoich uszu! Uszy każdego człowieka są inne! Jeśli gumki są za małe lub zbyt luźne, najprawdopodobniej usłyszysz



pisk (sprzężenie zwrotne). Zawsze wyłączaj aparaty słuchowe, dopóki nie umieścisz ich w uszach, aby zapobiec sprzężeniom.

3

## Regulacja głośności i wyłączanie

**Opcja 1:** Po zakończeniu korzystania z aparatu słuchowego włóż go z powrotem do etui ładującego – wyłączy się automatycznie.

**Opcja 2:** Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „O”, a aparat się wyłączy. Krótko naciśnij **klawisz M**, aby wyregulować głośność. Dostępne są łącznie 4 poziomy.



- Pierwszy poziom: „Du~”
- Drugi poziom: „Du~Du~”
- Trzeci poziom: „Du~Du~Du~”
- Maksymalny poziom: „Di~”.

**Ważne:** Zakładając aparat po raz pierwszy, zacznij od niższej głośności, a po założeniu stopniowo dostosuj ją do komfortowego poziomu.

7

## Wybór trybu programu

Prosimy o dostosowanie trybu programu po założeniu urządzenia. **Dostępne są trzy tryby.** Długie naciśnięcie klawisza „M” przez 3 sekundy pozwala na wybór różnych trybów. Naciśnij klawisz „M”, a pojedynczy sygnał dźwiękowy („beep”) potwierdzi wejście w dany tryb:

### Jeden sygnał „beep”

Przejdzie do Trybu Codziennego.

### Dwa sygnały „beep”

Przejdzie do Trybu Spotkania

### Trzy sygnały „beep”

przejdzie do Trybu Na zewnątrz.



8

## Ładowanie

**Czas ładowania:** Przed pierwszym użyciem zaleca się ładowanie przez 10–12 godzin, aby upewnić się, że bateria jest w pełni aktywowana w celu uzyskania optymalnej wydajności.

**Używaj oryginalnego kabla ładowania:** Zawsze używaj dołączonego, oryginalnego kabla, aby zapewnić bezpieczne połączenie i uniknąć problemów ponieważ tylko 2 godziny ładowania wystarczą, aby w pełni naładować aparat słuchowy. Należy unikać ładowania w ekstremalnych warunkach. Aby chronić żywotność baterii, utrzymuj temperaturę ładowania w zakresie otoczenia wynoszącym 5–35°C stopni. Zaleca się naładowanie etui (za pomocą dołączonego kabla USB) za każdym razem, gdy poziom naładowania etui spadnie poniżej 30%.



10

## 21-dniowy plan noszenia

### DROGA DO SŁYSZENIA

W przeciwieństwie do korekcji wzroku, która polega po prostu na założeniu okularów, korekcja słuchu jest procesem dość złożonym. Gdy rozpoczniesz swoją przygodę z poprawą słuchu, doświadczysz niezliczonych „nowych dźwięków”, a Twój mózg będzie potrzebował czasu na adaptację. Już po kilku tygodniach będziesz zszokowany dźwiękami, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, służymy pomocą z całego serca.

11

### PIERWSZY TYDZIEŃ

Niektóre dźwięki mogą wydawać się zbyt głośne, gdy zakładasz aparat słuchowy po raz pierwszy, na przykład szum lodówki, szelest papieru czy odgłos Twoich kroków. To normalne – Twój mózg uczy się, jak nadawać tym dźwiękom priorytety. Bądź cierpliwy!

#### Cierpliwość:

Na początku noś aparat słuchowy przez 30 minut dziennie. Każdego dnia staraj się wydłużać czas noszenia o kolejne 30 minut.

12

#### Ćwiczenie:

Posłuchaj uważnie piosenki lub obejrzyj film, który dobrze znasz. Ciesz się możliwością ponownego słyszenia!

### DRUGI TYDZIEŃ

Im więcej nosisz aparat słuchowy, tym bardziej adaptujesz się do różnych dźwięków w różnych środowiskach. Możesz nawet spróbować poprosić osoby w Twoim otoczeniu, aby nie mówiły już do Ciebie tak głośno. Komunikacja staje się teraz znacznie łatwiejsza.

13

### TRZECI TYDZIEŃ

Po kilku tygodniach poczujesz się znacznie bardziej energiczny, ponieważ nie musisz już poświęcać tyle energii na próby usłyszenia tego, co mówią inni! Dźwięk stanie się czystszy i wyraźniejszy. Słuchanie stanie się naturalne. Znowu będziesz cieszyć się dźwiękami, które towarzyszą Ci w życiu.


#### Uczestnictwo:

jedz posiłek w restauracji z przyjaciółmi, obejrzyj film w kinie, weź udział w rodzinnym spotkaniu i przestań się martwić, że ominą Cię ważne wspomnienia!

14

### Jak wymienić filtr przeciwwoskowiny?

Wsunąć uchwyt w stary filtr, wyciągnąć go, obrócić narzędzie i wcisnąć nowy biały filtr w otwór dźwiękowy, na koniec wyjmując sam uchwyt.

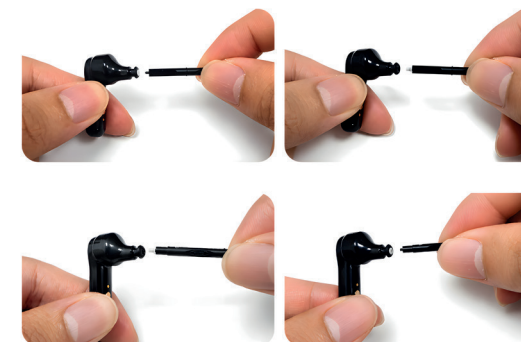

**Pamiętaj:** Wymieniaj filtr regularnie, aby zachować dobrą jakość dźwięku. Nie czyść zużytego filtra – zawsze wymieniaj go na nowy. Używaj wyłącznie filtrów przeznaczonych do Twojego modelu aparatu.