

295mm


Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zaufanie! Ta ulotka pomoże Ci szybko dowiedzieć się, jak korzystać z tej wagi.


01 Pobierz aplikację Fitdays+
Zeskanuj poniższy kod QR lub
wyszukaj „Fitdays+” w App
Store lub Google Play, aby
pobrać aplikację.




04 Połącz z urządzeniem
Wyszukaj urządzenie na liście
i połącz się z nim.

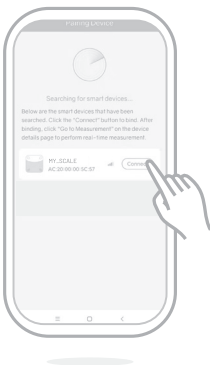


07 Ważna uwaga 2
Stój prosto ze stopami w lekkim rozkroku.
Upewnij się, że przednia część podeszwy
stopy zakrywa górne elektrody, a pięta
zakrywa dolne elektrody. Ważenie należy
wykonywać bez butów i skarpet.

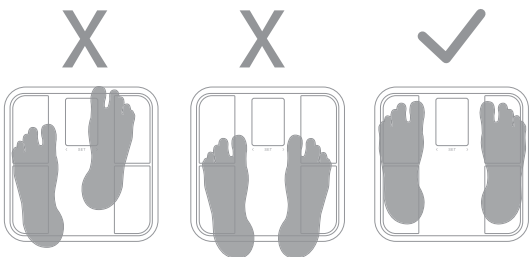


02 Zarejestruj się
W głównym interfejsie aplikacji
postępuj zgodnie z instrukcją,
aby zarejestrować konto.

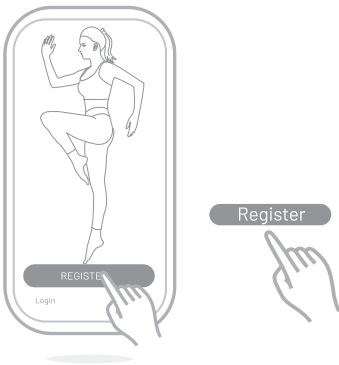


05 Użyj urządzenia
Stań na wadze, aby uruchomić wyświ-
etlacz. Gdy pojawi się wartość „0.0”,
wejdź na wagę i wyciągnij uchwyt.
Upewnij się, że Twoje palce dotykają
odpowiednich elektrod, tak jak pokaza-
no na poniższych ilustracjach.

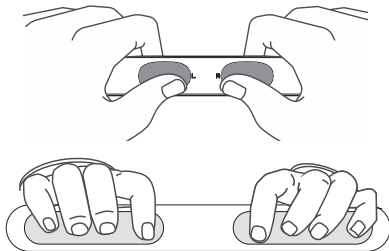


08 Pomiar danych
Aby uzyskać jak najdokładniejsze dane,
pozostaw aplikację otwartą na stronie
głównej, stój na wadze stabilnie i utrzymaj
pozycję pomiarową przez około 30 sekund.

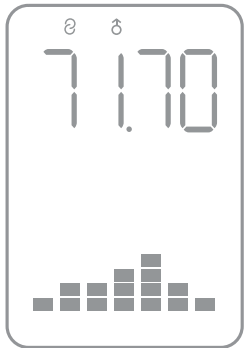


03 Wyszukaj urządzenie
Włącz Bluetooth, a następnie
w aplikacji wybierz kolejno:
Konto ► Urządzenia ► +.

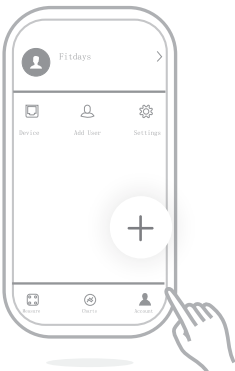

06 Ważna uwaga 1
Wyprostuj ramiona i trzymaj je
pod kątem 30°~45° odchylenia
od ciała.

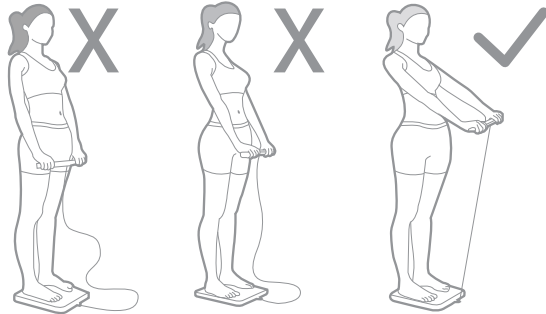

09 Po pomiarze
Możesz sprawdzić wagę, poziom tkanki
tłuszczowej, wskaźnik masy mięśniowej,
poziom wody w organizmie oraz BMI bez-
pośrednio na wyświetlaczu LED, a szcze-
gółowe dane przeanalizować w aplikacji.
Po pierwszym użyciu urządzenie obsługuje
tryb offline, więc nie ma potrzeby otwiera-
nia aplikacji przy każdym kolejnym ważeniu.

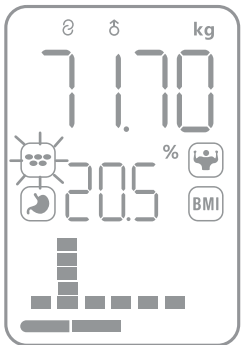

295mm

K=50%